

Kit de coloration H&E Tissue-Tek®

*La technologie Sakura pour
une coloration claire et homogène*



continuous innovation for pathology






Kit de coloration H&E Tissue-Tek®


L'hématoxyline et l'éosine (H&E) sont les techniques de coloration les plus couramment utilisées en pathologie de base pour un diagnostic médical. Toutefois, la coloration H&E n'est pas standardisée. La qualité des colorations H&E utilisées et la consistance des colorations varient en fonction du type d'hématoxyline, du protocole utilisé par le laboratoire et de l'âge des réactifs. Le kit de coloration Tissue-Tek H&E prêt à l'emploi de Sakura a été spécialement développé pour votre Tissue-Tek Prisma *Plus* afin d'apporter cette coloration claire et homogène à votre laboratoire.

Coloration claire et homogène


Le protocole H&E de Sakura® recommandé pour le Prisma *Plus* minimise les variations du processus et fournit des lames claires et rapidement colorées pour faciliter un diagnostic précis. Le kit H&E est fabriqué sous un contrôle de qualité strict pour produire des résultats de coloration clairs et cohérents. Un seul kit peut colorer jusqu'à 2 500 lames.

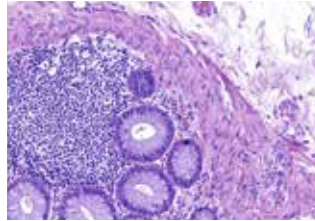


Côlon

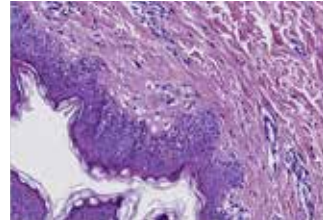

Peau

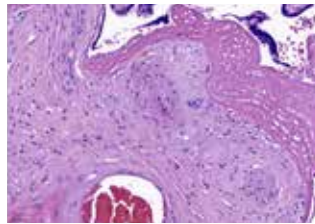

Placenta

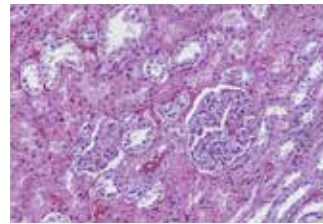

Rein

Solution d'hématoxyline à deux composants



Nous avons développé un système de mélange unique à deux solutions contenant de l'hématoxyline et un agent oxydant. Le système de mélange des deux solutions permet à l'utilisateur de déterminer la date de préparation de la solution de coloration, ce qui favorise une qualité de couleur constante. Tout en éliminant le risque de diminution de la puissance de coloration avec le temps.

En mélangeant les deux solutions au moins 24 heures avant utilisation, la coloration peut être préparée à tout moment et sa puissance, contrôlée facilement. La solution mixte permet d'obtenir des lames claires, toujours bien colorées.

¹ Pour connaître le protocole recommandé, veuillez contacter votre représentant Sakura local.

Kit de coloration H&E Tissue-Tek

- Qualité, efficacité et vitesse de coloration constantes*
- Solution à deux composants
- Volume synchronisé pour un usage unique dans le réservoir standard Prisma *Plus*
- Gestion des réactifs par code-barres

* En combinaison avec la fonction de gestion de la quantité des lames.



Code-barres pour la gestion des réactifs

Chaque kit et composant H&E porte un code-barres pour permettre le scannage de son numéro de lot et de sa date de péremption. L'option de connexion d'un lecteur de codes-barres au Prisma *Plus* permet de garantir la traçabilité des résultats de coloration. Le rapport de coloration inclut désormais des informations sur la gestion des réactifs, telles que le nom de la solution, la date de péremption et le numéro de lot, qui sont imprimées sur le code-barres de l'emballage.

Volume synchronisé pour un usage unique

Le conditionnement de la solution de coloration se présente sous la forme de quantités à usage unique optimales pour un réservoir de solution standard Prisma *Plus*.



Consultez notre site Internet à l'adresse www.sakura.com

Sakura Finetek France SAS, 18, rue Hergé Parc Scientifique de la Haute Borne,
59650 Villeneuve d'Ascq, France

