

Tissue-Tek Xpress® x120

Processore rapido di tessuti

*Immagina... una processazione
rapida e continua per un flusso
di lavoro lineare*



continuous innovation for pathology



**Lavorare in modo continuo,
sicuro e standardizzato
accelerando al contempo
la processazione dei tessuti.**

Tissue-Tek Xpress® x120

Il processore rapido di tessuti Tissue-Tek Xpress® x120 di Sakura è l'unico strumento che offre una processazione continua dei tessuti per semplificare il flusso di lavoro nell'istologia.

SMART Automation

Tissue-Tek Xpress x120 fa parte del concetto di SMART Automation di Sakura che automatizza il lavoro manuale e crea un flusso continuo in tutto il laboratorio, aiutandovi a fornire diagnosi rapide e precise per ottimizzare il buon esito delle cure.

Volete eliminare le attività superflue e ripetitive del personale di laboratorio in modo che possa concentrarsi sugli aspetti essenziali? Il sistema di trasferimento automatico Tissue-Tek SmartConnect® è la nuova soluzione di Sakura che collega Tissue-Tek Xpress x120 al sistema di inclusione automatizzato Tissue-Tek AutoTEC® a120, contribuendo ad aumentare l'efficienza del laboratorio.








Caricamento continuo per un flusso di lavoro senza pari

Tissue-Tek Xpress x120 assicura una processazione continua, per un flusso di lavoro lineare in laboratorio.

- Carica in modo continuo fino a 40 cassette ogni 20 minuti per eliminare i rallentamenti nella produzione.
- Crea un flusso costante di casi nel corso della giornata per rendere gestibile il carico di lavoro.
- Non sono necessari cicli di pulizia tra una sessione e l'altra, riducendo i tempi di fermo degli strumenti e aumentando la produttività giornaliera.

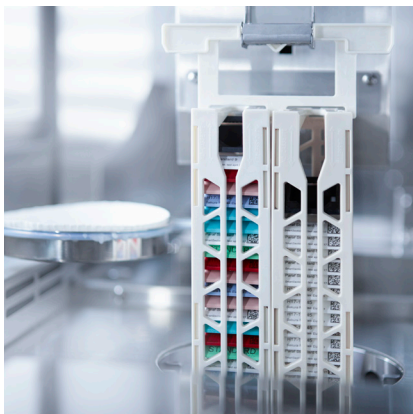

Processazione standardizzata e di qualità superiore

Tissue-Tek Xpress x120 è il punto di partenza per ottenere un flusso continuo in laboratorio, per tessuti processati conformi e di alta qualità.

- Due protocolli standard consentono una processazione rapida e continua sia delle biopsie che dei tessuti di dimensioni maggiori.
- I reagenti di facile impiego molecolare forniscono eccellenti dettagli morfologici e nucleari.



Sicurezza per l'utente

Xpress x120 è progettato per un utilizzo semplice grazie al funzionamento con un solo tasto, alla manutenzione minima da parte dell'utente e a un ambiente di lavoro sicuro.

- I reagenti senza xilene e formalina favoriscono un ambiente di lavoro meno pericoloso.
- Reagenti pronti all'uso per una sostituzione rapida, semplice e senza errori.

Set reagenti per Xpress x120 e Xpress Soluzione pre-processo

Il set di reagenti Xpress® x120 è un set completo che contiene il volume corretto di reagenti per l'uso nei quattro retort. Non sono necessarie diluizioni o versamenti. In questo modo si riduce al minimo il rischio di errori legati ai reagenti.

La soluzione pre-processo Tissue-Tek Xpress® prepara il campione caricato per le fasi successive che avvengono nei retort di Xpress x120. Ciò semplifica e accelera la fase di processazione.

Ponte tra professionisti e tecnologia

L'implementazione di nuove tecnologie nel laboratorio porta con sé sfide uniche. La sfida più grande del cambiamento è far sì che tutti lo accettino.

Con Sakura Bridge, il nostro servizio di implementazione, aiutiamo i laboratori a raggiungere gli obiettivi prefissati, a fornire risultati ottimali e a ottenere il massimo da Xpress x120.

Il nostro team di esperti offre una gamma di strumenti che agevolano i professionisti nell'utilizzo di Xpress x120. Ad esempio, un workshop sul fissaggio, nel quale il personale impara come fissare i tessuti in modo ottimale. In questo modo la qualità di immissione in Xpress x120 sarà migliore, dando luogo a cassette processate della massima qualità.



Bridge

Sakura Bridge migliora l'efficienza del tuo laboratorio integrando le nostre soluzioni- per la SMART Automation: Tissue-Tek AutoTEC® a120, Tissue-Tek Xpress® x120, Tissue-Tek SmartConnect® e Tissue-Tek Genie®.

Collaborando strettamente con il tuo team per ottimizzare i flussi di lavoro del laboratorio, i nostri consulenti ti aiuteranno a ridurre gli arretrati e standardizzare le procedure.

Dal planning di pre-installazione al supporto post-implementazione, Sakura Bridge assicura una transizione fluida e un successo a lungo termine.

Con una guida personalizzata e un'ottimizzazione continua, ti aiutiamo a raggiungere una maggiore produttività, tempi di risposta ridotti e un laboratorio più efficiente, pronto a soddisfare le esigenze di oggi e le sfide future.





