

Kit de tinción Tissue-Tek® H&E

*Tecnología de Sakura para
una tinción clara y uniforme*



continuous innovation for pathology




The background image shows a laboratory environment. In the foreground, a tissue processor is visible, with several white plastic cassettes hanging from a metal arm. The cassettes contain tissue blocks, some of which are stained with a purple color. Below the cassettes, there are several white plastic trays, some of which contain liquid. In the background, a person in a white lab coat is visible, looking down at something. The overall scene is brightly lit and professional.

Kit de tinción Tissue-Tek® H&E


El uso de hematoxilina y eosina (H&E) es la técnica de tinción más utilizada en la patología rutinaria para el diagnóstico médico. No obstante, la tinción con H&E no está estandarizada. La calidad de las tinciones con H&E utilizadas y la consistencia de la tinción varían en función del tipo de hematoxilina, el protocolo utilizado por el laboratorio y la antigüedad de los reactivos. El kit de tinción Tissue-Tek H&E de Sakura se ofrece listo para su uso y se ha desarrollado específicamente para su Tissue-Tek Prisma *Plus* con el fin de aportar esa tinción clara y uniforme a su laboratorio.

Tinción clara y uniforme


El protocolo recomendado por Sakura® con H&E para el sistema Prisma *Plus* minimiza la variación del proceso y proporciona portaobjetos con una tinción clara y rápida para facilitar un diagnóstico preciso. El kit H&E se fabrica bajo un estricto control de calidad para obtener resultados de tinción claros y uniformes. Un solo kit proporciona tinción para un máximo de 2500 preparaciones.

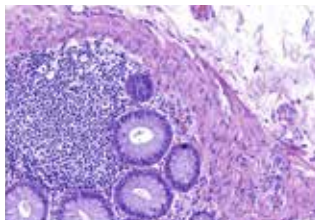


Colon

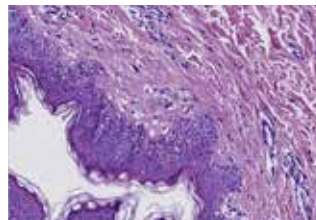

Piel

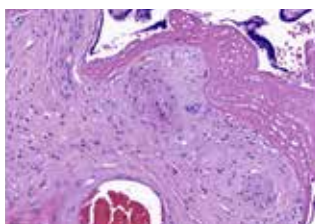

Placenta

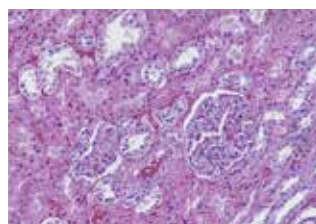

Riñón

Solución de hematoxilina de dos componentes



Hemos desarrollado un exclusivo sistema de mezclado de dos soluciones que contiene hematoxilina y un oxidante. El sistema de mezclado de dos soluciones permite al usuario determinar la fecha de preparación de la solución de tinción, lo que favorece la obtención de una calidad del color uniforme. Elimina el riesgo de que la tinción pierda intensidad con el tiempo.

Al mezclar los dos componentes al menos 24 horas antes de su uso, la tinción se puede preparar en cualquier momento y su intensidad se puede controlar fácilmente. La solución mezclada logra preparaciones claras, con una buena tinción y uniformes.

¹ Para obtener información sobre el protocolo recomendado, póngase en contacto con su representante local de Sakura.

Kit de tinción Tissue-Tek H&E

- Calidad, eficiencia y velocidad de tinción uniformes*
- Solución de dos componentes
- Volumen sincronizado para un solo uso en el depósito estándar Prisma *Plus*
- Gestión de reactivos mediante códigos de barras

* Cuando se utiliza en combinación con la función de gestión de cantidad de preparaciones.



Códigos de barras para la gestión de reactivos

Cada kit H&E y cada componente tienen un código de barras que permite el escaneo de su número de lote y fecha de caducidad. La opción de conectar un lector de código de barras al sistema Prisma *Plus* permite garantizar la trazabilidad de los resultados de la tinción. El informe de tinción ahora incluye información sobre la gestión de reactivos, como el nombre de la solución, la fecha de caducidad y el número de lote, que está impreso en el código de barras del envase.

Volumen sincronizado para un solo uso

El envase de la solución de tinción se presenta en cantidades de un solo uso óptimas para un depósito de solución estándar Prisma *Plus*.



Visítenos en sakura.com

Sakura Finetek Spain, S.L.,
Ronda Sant Pere 17, 6-1, 08010 Barcelona, España

