

Tissue-Tek® H&E Färbekit

*Sakuras Technologie für eine
klare und konsistente Färbung*



continuous innovation for pathology






Tissue-Tek® H&E Färbekit


Hämatoxylin und Eosin (H&E) sind die am häufigsten verwendete Färbetechnik in der routinemäßigen Pathologie für die medizinische Diagnose. Die H&E-Färbung ist jedoch nicht standardisiert. Die Qualität der verwendeten H&E-Färbungen und die Konsistenz der Färbung hängen von der Art des Hämatoxylins, dem vom Labor verwendeten Protokoll und dem Alter der Reagenzien ab. Das gebrauchsfertige Tissue-Tek H&E Färbe-Kit von Sakura wurde speziell für Ihren Tissue-Tek Prisma *Plus* entwickelt, um diese klare, konsistente Färbung in Ihr Labor zu bringen.

Klare und einheitliche Färbung


Das empfohlene Sakura® H&E-Protokoll für den Prisma *Plus* minimiert Prozessschwankungen und bietet klare, schnell gefärbte Objektträger für eine genaue Diagnose. Das H&E-Kit wird unter strenger Qualitätskontrolle hergestellt, um klare und konsistente Färbeargebnisse zu erzielen. Ein einzelnes Kit kann bis zu 2.500 Objektträger färben.

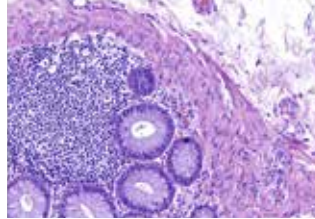


Dickdarm

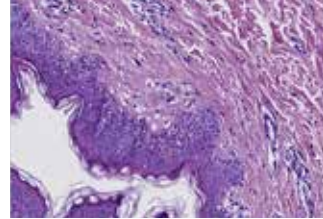

Haut

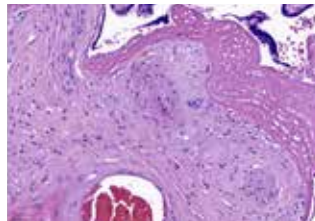

Plazenta

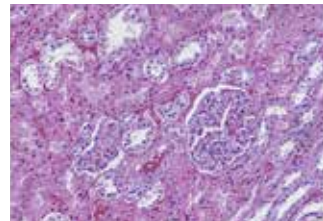

Niere

Zweikomponenten-Hämatoxylinlösung



Wir haben ein einzigartiges Zwei-Lösungs-Mischsystem entwickelt, das Hämatoxylin und einen Oxidationsmittel enthält. Mit dem Mischsystem für zwei Lösungen kann der Benutzer das Datum der Vorbereitung der Färbelösung bestimmen, was eine konsistente Farbqualität unterstützt. Beseitigen Sie das Risiko, dass die Färbestärke mit der Zeit abnimmt.

Durch das Mischen der beiden Färbemittel mindestens 24 Stunden vor dem Gebrauch kann die Färbung jederzeit vorbereitet und seine Stärke leicht kontrolliert werden. Die Mischlösung erzielt klare, durchgehend gut gefärbte Objektträger.

¹ Für das empfohlene Protokoll wenden Sie sich bitte an Ihren Sakura-Vertreter vor Ort.

Tissue-Tek H&E Färbekit

- Gleichbleibende Färbequalität, Effizienz und Geschwindigkeit*
- Zweikomponentenlösung
- Synchronisiertes Volumen für den einmaligen Gebrauch im Prisma *Plus* -Standardbehälter
- Reagenzienmanagement per Barcode

* Bei Verwendung in Kombination mit der Funktion Objektträger-Mengenmanagement.



Mit Strichcode für Reagenzienmanagement

Jedes H&E-Kit und jede Komponente ist mit einem Strichcode versehen, um das Scannen der Chargennummer und des Verfallsdatums zu ermöglichen. Die Möglichkeit, einen Strichcodeleser an Prisma *Plus* anzuschließen, ermöglicht die Rückverfolgbarkeit von Färbeergebnissen. Der Färberbericht enthält nun Informationen zur Reagenzienverwaltung, wie Lösungsname, Verfallsdatum und Chargennummer, die auf dem Verpackungs-Strichcode aufgedruckt sind.

Synchronisiertes Volumen für den Einmalgebrauch

Die Verpackung der Färbelösung wird in optimalen Einwegmengen für einen Prisma *Plus* Standard-Lösungsbehälter geliefert.



Besuchen Sie uns unter sakura.com

Sakura Finetek Germany GmbH, Am Gansacker 10 c, 79224 Umkirch, Germany
Sakura Finetek Austria GmbH, Office Park 1, Top B02, 1300 Wien, Austria

